

DERMAFIX

microneedling verticale

With compliments



mbe 
maya beauty engineering

MEDICAL DIVISION
Health matters

Via Collamarini, 21
40138 Bologna - ITALY
Tel. +39 051 782368
Fax +39 051 782032
www.mbemedicale.it
info@mayabeauty.it

© Copyright Maya Beauty Engineering S.r.l. - Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata. - Le immagini hanno esclusivo valore indicativo.




ISO 9001
ISO 13485

mbe 
maya beauty engineering
MEDICAL DIVISION
Health matters

"DERMAFIX: dispositivo automatico per microneedling verticale"


Stimolando il naturale processo di riparazione cutanea, Dermafix, promuove la formazione di nuovo collagene ed elastina. Inoltre, attraverso la creazione di microcanali nello strato superficiale cutaneo, DERMAFIX aiuta ad aumentare il grado di assorbimento dei principi attivi presenti nei prodotti applicati.

* *Induzione Naturale Produzione di Collagene [NCI]*

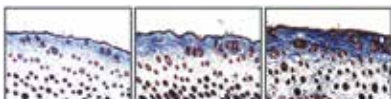

Controllo IPL GENOSYS DERMAFIX
[Histology MT stain, x 100]

Vie transdermiche
(Aumento della capacità di assorbimento)

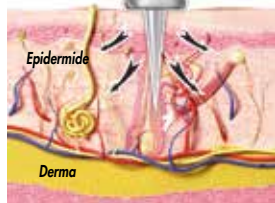

Le cartucce aghi di DERMAFIX sono sterilizzate per garantire totale sicurezza e igiene e, grazie a un design unico nel suo genere, permettono di evitare la contaminazione del dispositivo da parte di sangue o soluzioni.



Scatola da 10 cartucce



■ Peculiarità di DERMAFIX

• **Cartuccia aghi:** Ogni cartuccia è composta da 4 dischi composti, a loro volta, da 4 aghi. Questo tipo di struttura permette di eseguire il trattamento in totale sicurezza, senza danni al tessuto derivanti dalla microperforazione e senza danneggiamento degli aghi nel corso dei trattamenti.

• **Numero di aghi:** il dispositivo è dotato di 16 aghi. L'elevato numero di microaghi permette la creazione di un numero di microcanali superiore rispetto ai dispositivi tradizionali, generalmente dotati di 9-12 aghi.

• **Spessore degli aghi:** 0.20mm La sensazione di dolore è ridotta al minimo.

• **Forma di taglio dell'ago: ESAGONALE:** La caratteristica principale di questi aghi sta nella loro forma. A differenza della maggior parte degli altri dispositivi dotati di struttura circolare, ogni ago ha infatti una struttura esagonale. Questa forma caratteristica permette di ridurre la superficie dell'ago a contatto con la pelle durante lo stimolo, riducendo così la sensazione di dolore.

• **Aghi sterili:** La sterilità degli aghi garantisce al trattamento igiene e sicurezza.

• **Velocità regolabile:** 9 livelli.

• **Lunghezza regolabile degli aghi:** da 0.25mm a 2.00mm. Il dispositivo permette in ogni momento di variare la lunghezza degli aghi in base alla tipologia di trattamento che si sta effettuando. Questo permette di personalizzare il trattamento, rendendolo più efficace in base alle diverse esigenze delle pelli trattate e ai differenti inestetismi.

• **Adatto a tutti i tipi di pelle,** può essere utilizzato anche su pelli sottoposte a peeling o laser.

• **Economico:** rispetto ai tradizionali laser o altri trattamenti di resurfacing Genosys Dermafix presenta un notevole vantaggio economico.

■ Effetti di DERMAFIX

- Effetto firming e lifting
- Illuminante e schiarente
- Rughe e segni d'espressione (Viso, collo e décolleté)
- Miglioramento delle cicatrici da acne e da ustione
- Miglioramento delle smagliature
- Trattamento della caduta dei capelli (alopecia)
- Ridimensionamento dei pori della pelle
- Coadiuvante nel trattamento dell'iperidrosi
- Agevola la penetrazione dei cosmetici applicati

■ Specifiche tecniche:

- **Dotazione:** Dispositivo Dermafix, adattatore, n. 2 cartucce monouso
- **Giri al minuto:** 1000~6000
- **Adattatore:** Input - 100V~240V (50/60Hz) - Output - DC 1~12V (100~1000mA)
- **Voltaggio del dispositivo:** 12V
- **Peso del dispositivo:** 101g

